



Gør vejen til førstehjælp let,
hurtig og effektiv

plum



Førstehjælp skal være lige ved hånden

Hver dag sker der små og store uheld – det er den barske virkelighed. Derfor er det vigtigt altid at have førstehjælp ved hånden – hvis uheldet er ude.

Vi tilbyder dig og dine kollegaer et bredt udvalg af førstehjælpsprodukter, så du hurtigt, sikkert og hygiejnisk kan behandle rifter og mindre sår samt skader på øjnene.



Udgangspunktet er dine behov

Førstehjælpsprodukterne består af plastre, sårrenseservietter og et bredt sortiment af øjenskylleløsninger. Du kan sammensætte produkterne, præcis som du vil. Det vigtigste er, at førstehjælpen dækker de uheld, der kan ske på netop din arbejdsplads – afdeling for afdeling.

Hurtig hjælp er dobbelt hjælp

Hvis uheldet er ude, vil hurtig førstehjælp være altafgørende for skadens omfang. Særligt når det gælder øjenulykker. Men også ved små skader som sår og rifter er en hurtig førstehjælp vigtig. Du begrænser generne og er hurtigt klar igen.

Tilgængelighed er nøglen!

Det kan ikke understreges nok. Førstehjælp skal være ved hånden – ikke bagerst i skabet, nederst i skuffen eller et andet sted, hvor det ikke er til at få fat på hurtigt, let og effektivt. Derfor kan vores produkter hænges op, hvor alle kan se dem, og hvor alle kan komme til. Det gælder både de enkelte produkter og førstehjælpsstationen. Læs mere om det hele på de næste sider. Og gør det, inden uheldet er ude næste gang.



Du har kun to øjne – pas på dem!

Så let skyller du!



Flasken tages vandret ud af holderen.



Øjenkoppen drejes, til forseglingen brydes.




Læn hovedet bagover og skyl.



Læn dig eventuelt frem og skyl, hvis du vil undgå, at tøjet bliver vådt.

Vigtigt: Ved alle skadetyper skal øjenskylllevæskan ramme øjet med en blød, jævn stråle. Tryk let på flasken uden at klemme den. Kontakt altid en læge og fortsæt skylningen under transporten.

Øjenkoppen er formet efter øjets naturlige runding – behageligt, hygiejnisk og nemt for dig, hvis uheldet er ude.

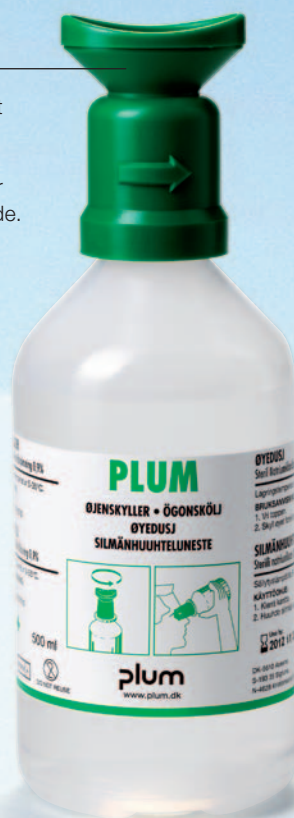

Synet er en af vores vigtigste sanser

Synet er afgørende i de fleste arbejdsfunktioner. Så pas på dine øjne. Du kommer langt med omtanke og fornuft, men desværre er det ikke altid nok. Ingen kan gardere sig mod uheld – men alle kan sørge for at være beredt. Med vores øjenskylløsninger ved hånden, har du gjort, hvad du kan.

Et afgørende øjeblik

Er uheldet ude, kan få sekunder være forskellen på, om dit syn tager skade eller ej. Derfor er hurtig adgang til øjenskyllning altafgørende ved alle arbejdspladser, hvor der er risiko for øjenulykker.

Effektive skylleløsninger

Plum Øjenskyller er velegnet til bortskylning af fremmedlegemer i øjet og pH Neutral til neutralisering af syrer og baser.

Fleksibel systemløsning

Et bredt produktprogram sikrer dig en optimal løsning til netop dit behov. Små og store stationer

til vægmontering direkte ved arbejdsstedet.

Eller små mobile løsninger til at have med sig i varebilen, i værktøjs- og førstehjælpskassen eller i den specielle bæltetaske.

Lang holdbarhed

Uåbnet er den sterile væske holdbar i 3 år. Holdbarhedsdato fremgår tydeligt af flaskens etiket.

Enkel og hurtig anvendelse

Systemet er udviklet, så du let og hurtigt kan skylle øjet. To enkle bevægelser og flasken er klar til skylning. Tydelig brugsvejledning med tekst og piktogram på flaskerne og stationerne hjælper dig på korrekt og sikker vej.

Høj funktionssikkerhed

Ergonomiske øjenkopper sikrer dig en nem og direkte skylning af øjnene og sørger samtidig for, at væsken ledes væk fra øjnene igen. Flaskerne er CE-mærkede i henhold til de gældende regler for medicinsk udstyr.

pH Neutral til syrer og baser

Dokumenteret sikkerhed og effekt

Syrer og baser kan komme i øjet som fast, flydende eller gasagtigt stof. Et bilbatteri, der eksploderer, kan medføre alvorlige syreskader på øjet. Endnu værre kan det gå med blot få dråber kraftig base, som på kort tid kan føre til alvorlige beskadigelser af hornhinden.

Alvoren af en ætseskade afhænger primært af:

- Kemikaliets koncentration – stærke syrer og baser er voldsomt ætsende.
- Temperaturen – en høj temperatur forstærker kemikaliets ætsende egenskaber.
- Kontakttiden – jo længere kontaktid des dybere penetration og dermed større risiko for alvorlige skader.

Få sekunder afgør alt

Ved ulykker med syrer og baser gælder det om hurtigst muligt at neutralisere kemikaliets til et pH-niveau omkring 7,4 svarende til øjenvæskens normale pH-niveau. Den bedste effekt opnås før syren eller basen er trængt igennem hornhinden. Jo stærkere syren eller basen er, jo længere neutraliseringstid. For at optimere sikkerheden, hvor der er risiko for syre- og baseskader, skal øjenskylløsningen være:

- Let tilgængelig
- Hurtig at betjene
- Effektiv

Øjenskylløsningen skal være effektiv

pH Neutral er en 4,9 % fosfatbuffer, der hurtigt og effektivt neutraliserer selv meget stærke syrer og baser. Væsken er opbygget af fosfatsalte, som i forvejen findes i kroppen. Bufferdelen hydrogenfosfat er effektiv mod syrer, mens den anden bufferdel dihydrogenfosfat reagerer imod basiske stoffer. Ved at anvende normalt vand eller 0,9 % natriumklorid opnår du kun en fortyndings- og skylleeffekt. Det betyder, at der skal anvendes væsentligt større mængder, og dermed en længere skylletid.

Ved hjælp af en in vitro titreringsanalyse i laboratoriet, har vi testet neutraliseringseffekten af pH Neutral overfor henholdsvis stærke syrer og stærke baser sammenlignet med effekten af en almindelig øjenskylløsning med 0,9 % natriumklorid. Testens resultat viser tydeligt, at pH Neutral neutraliserer både syrer og baser til et uskadeligt pH-niveau. Almindelig øjenskylløsning fortynder væsken, men der opnås kun små ændringer i pH-værdien (Figur 1).

Virkningen af pH Neutral er også dokumenteret gennem videnskabelige studier.¹⁾²⁾

Anbefalet brug af pH Neutral

pH Neutral er en 2 minutters øjenskylløsning til ulykker med syrer og baser. Formålet med at skylle med pH Neutral er at bringe skadestoffets pH-værdi til et uskadeligt niveau hurtigst muligt. Vi anbefaler at fortsætte skylningen frem til lægen med Plum Øjenskyller 0,9 % natriumklorid.

Yderligere undersøgelser foretaget af eksterne øjenspecialister konkluderer, at den anbefalede skylletid på 2 minutter med pH Neutral er en sikker procedure.³⁾⁴⁾

1: Prof. Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vortrag: Augenverätzungen - Was gibt es Neues? Regionalforum Arbeitsmedizin, Stuttgart 23.02.2006, Folien 44 ff..

2: Professor Dr. med. Schrage N.F., Facharzt für Augenheilkunde an der Augenklinik Merheim, Ostheimer Str. 200 in 51109 Köln, in Kooperation mit dem Aachener Centrum für Technologietransfer in der Ophthalmologie ACTO, Geschäftsstelle Karlsburgweg 9 in 52070 Aachen, Vergleichsergebnisse von pH Neutral an verätzten Augen, Spülversuche an mit NaOH verätzten Kanichenaugen im Vergleich von Plum pH Neutral mit physiologischer Kochsalzlösung, 24.05.2005.


3: Corydon L, Høgsbro M, Cheeseman J, Jacobsen ME. Klinisk undersøgelse af øjenskylløsning med bufferløsning, Klinisk undersøgelsesrapport, Vejle Sygehus, 2003.

4: Damgaard AL, Hovendal MP, Schröder MP, Saxtorph H, Bollen P. First aid treatment of alkali eye burns with phosphate buffer does not cause corneal calcifications. Poster, EAPCCT XXIX International Congress in Stockholm, 2009.



En hurtig, øjeblikkelig og effektiv indsats er helt afgørende for skadens omfang ved øjenuheld med syrer og baser. Ætseskader er altid alvorlige, da ætsningen sker inden for kort tid.

Figur 1: Neutraliseringseffekten af pH Neutral og 0,9 % natriumklorid*

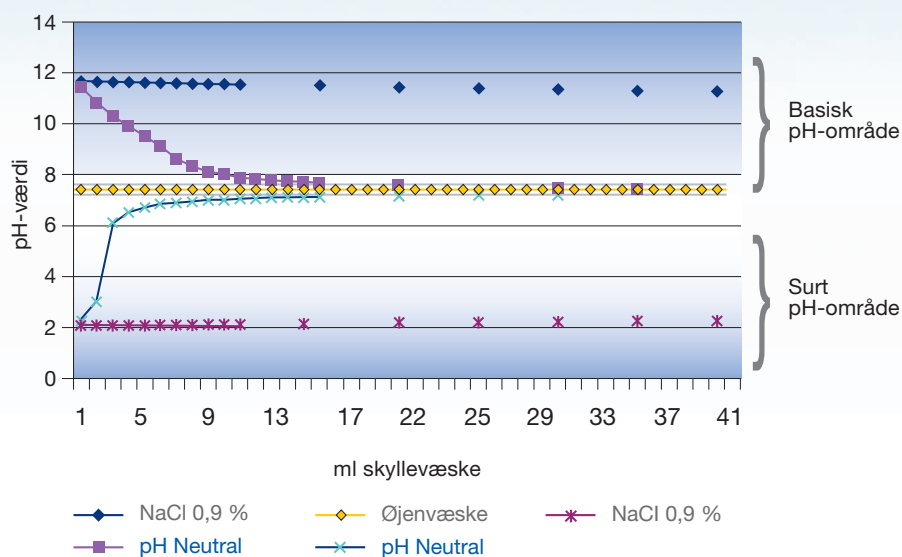

* En titreringsanalyse udført i laboratoriet (in vitro) hos Plum A/S. I testen blev pH Neutral og 0,9 % natriumklorid gradvist tilført en opløsning med 1 dråbe svovlsyre + 40 ml vand henholdsvis 1 dråbe kaliumhydroxid + 40 ml vand. Ændringen i pH-værdien og mængden af skyllevæske blev målt.

Tilpasset dit behov

pH Neutral leveres i en lille handy 200 ml flaske, som let kan placeres tæt ved arbejdspladsen, i værktøjskassen og i førstehjælpskassen. Derudover findes pH Neutral i en 500 ml flaske med en speciel dobbelt øjenkop til de arbejdsituationer, hvor der er risiko for at begge øjne rammes af syrer eller baser. Begge flasker har en skylletid på ca. 2 minutter.

Få, enkle bevægelser og du er klar til at skylle

- Drej øjenkoppen i pilens retning til forseglingen brydes.
- Læn hovedet bagover og skyl.





Vi er skabt med to øjne. Nu kan du skylle begge på én gang med Duo

Mange øjenulykker rammer begge øjne. Alligevel har du indtil nu ikke kunnet få en mobil øjenskyller, som kan skylle begge øjne på én gang. Det betyder, at du ved alvorlige ulykker har måttet stille dig selv det urimelige spørgsmål: Hvilket øje vil du redde?

Det behøver du ikke længere. Plum Duo er derfor i mange tilfælde et nødvendigt supplement til dit almindelige øjenskyllsystem. Du kan få Plum Duo både som pH Neutral og Plum Øjenskyller med 0,9 % natriumklorid.



Hvis begge øjne er ramt af f.eks. syre eller andre skadelige stoffer, kan det koste dyrt at miste tid.




Med Duo kan du skylle begge øjne på én gang. En blød stråle skyller skadestoffet væk fra øjnene.



Øjenkoppens udformning hjælper dig med at holde øjnene åbne.

Sådan forebygger du øjenskader

Når uheldet er ude, handler det om at skylle effektivt og hurtigst muligt for at forebygge eller begrænse skaden. Produktprogrammet er så bredt, at du kan finde præcis den øjenskylløsning, der dækker risikoen på din arbejdsplads. I førstehjælpsplanen her under får du information om, hvordan der skal skylles ved forskellige typer uheld. Planen kan rekvireres separat.

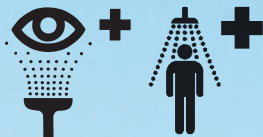

Førstehjælpsplan ved øjenulykker

SKADESTOF	ØJENSKYLNING	FORTSAT SKYLNING	SKYLLETID
Fremmedlegemer f.eks. støv, snavs, metal- og træsplinter	Plum Øjenskyller	Plum Øjenskyller	Skyl til fremmedlegemet er skyllet ud
Syreskader	pH Neutral	Plum Øjenskyller	Skyl 2 minutter med pH Neutral til flasken er tom og fortsæt skylningen med Plum Øjenskyller frem til lægen
Alkaliske skader	pH Neutral	Plum Øjenskyller	Skyl 2 minutter med pH Neutral til flasken er tom og fortsæt skylningen med Plum Øjenskyller frem til lægen
Andre skader (f.eks. opløsningsmidler og olier)	Plum Øjenskyller	Plum Øjenskyller	Skyl indtil ubehaget forsvinder og fortsæt skylningen frem til lægen
Skader på huden fra syrer, baser og kemikalier	pH Neutral	Plum Øjenskyller	Skyl 2 minutter med pH Neutral til flasken er tom og fortsæt skylningen med Plum Øjenskyller frem til lægen

Vigtigt! Ved alle skadetyper skal øjenskylløvæsken ramme øjet i en blød, jævn stråle. Tryk let på flasken uden at klemme den. Kontakt altid en læge og fortsæt skylningen under transporten.

Syre- og baseskader

Ved skader med syrer og baser begynder ætsningen, så snart skadestoffet kommer i kontakt med øjet. Til sådanne skader anbefaler vi pH Neutral efterfulgt af Plum Øjenskyller.

Mekaniske skader

Tiden er også vigtig ved mekaniske skader fra f.eks. metal- og træsplinter, støv og andet snavs. Her kan øjeblikkelig skylning forebygge, at disse fremmedlegemer sætter sig så fast, at der opstår


alvorlige skader på øjet. Her vil Plum Øjenskyller være det optimale valg.

Find den kombination, som passer dig

Vores produktprogram består af øjenskylløsninger i forskellige størrelser og til forskellige typer skader alt afhængig af behov. Du kan håndplukke produkter og sammensætte et program, der præcis matcher behovene og risiciene på netop din arbejdsplads.

Skylleløsninger ved fremmedlegemer

Nedenfor finder du en oversigt over de optimale øjenskylleløsninger til ulykker med fremmedlegemer.

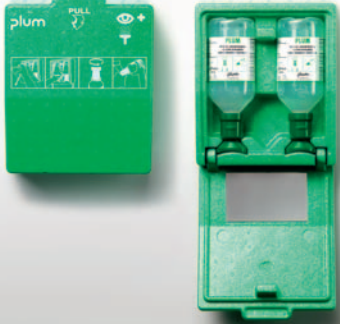200 ml Plum Øjenskyller  En lille og handy flaske med 0,9 % steril natriumklorid. Flasken er let at have med sig i den specialdesignede bæltetaske, i første-hjælpskassen, i værktøjskassen o. lign. Skylletid: ca. 2 min. Varenr.: 4690 Forpakning: 10 x 200 ml	500 ml Plum Øjenskyller  Flaske med 0,9 % steril natriumklorid. Flasken kan bruges til genopfyldning i stationer eller løst. Skylletid: ca. 5 min. Varenr.: 4602 Forpakning: 12 x 500 ml	1.000 ml Plum Øjenskyller Duo  0,9 % steril natriumklorid. Udstyret med Duo øjenkop, der gør det muligt at skylle begge øjne samtidigt. Kan bruges løst eller som opfyldning i Duo øjenskyllestationerne. Skylletid: ca. 5 min. Varenr.: 4804 Forpakning: 6 x 1.000 ml
Plum Øjenskyllestation med 1 flaske  Vægstation med 500 ml Plum Øjenskyller og løst piktogram. Specielt velegnet til steder, hvor øjeblikkelig skylning er påkrævet, til mindre arbejdspladser – samt til mobile arbejdspladser. Skylletid: ca. 5 min. Varenr.: 4610 Forpakning: 1 stk.	Plum Øjenskyllestation Duo  Vægstation med 1.000 ml Plum Øjenskyller Duo, vægholder, piktogram og spejl. Specielt velegnet til mindre samt mobile arbejdspladser, hvor der er risiko for at begge øjne rammes. Skylletid: ca. 5 min. Varenr.: 4806 Forpakning: 1 stk.	Plum Øjenskylleboks Duo  Støvtæt vægstation med 2 x 1.000 ml Plum Øjenskyller Duo, Piktogram på fronten og spejl indvendig i låget. Særligt velegnet til produktionsområder med meget støv og snavs samt mobile arbejdspladser. Skylletid: ca. 10 min. Varenr.: 4815 Forpakning: 1 stk.
Plum Øjenskyllestation med 2 flasker  En hurtig øjenskylle-løsning, der er let at placere tæt ved arbejdsstedet. Stationen er udstyret med spejl og tydelig brugervejledning for at sikre en hurtig og korrekt øjenskyllning ved uheld. Ikke velegnet til steder med støv og snavs. Skylletid: ca. 10 min. Varenr.: 4693 Forpakning: 1 stk.	Plum Øjenskyllestation med 2 flasker  Støvtæt vægstation i slagfast flamingo med 2 x 500 ml Plum Øjenskyller. Specielt velegnet til produktionsområder med meget snavs og støv – samt til mobile arbejdspladser. Er udstyret med piktogram på fronten og spejl indvendig i låget. Fås også med varmeelement Varenr. 4653 Skylletid: ca. 10 min. Varenr.: 4652 Forpakning: 1 stk.	

Alle flasker er CE-mærket og har en holdbarhed på 3 år

Skylleløsninger ved syrer og baser

Ved ulykker med syrer og baser kan vi tilbyde følgende program af flasker og stationer.

200 ml pH Neutral



En lille handy flaske med 4,9 % steril fosfatbuffer, der hurtigt neutraliserer syrer og baser. Flasken er let at have med sig i den specialdesignede bæltetaske, i førstehjælpskassen, i værktøjskassen o. lign. Er også velegnet til genopfyldning i stationerne.

Skylletid: ca. 2 min.
Varenr.: 4751
Forpakning: 10 x 200 ml

500 ml pH Neutral Duo



Steril 4,9 % fosfatbuffer, der hurtigt neutraliserer syrer og baser. Er udstyret med en Duo øjenkop, der gør det muligt at skylle begge øjne samtidigt. Kan anvendes løst eller til genopfyldning i Duo øjenskyllestationerne.

Skylletid: ca. 2 min.
Varenr.: 4805
Forpakning: 6 x 500 ml

Plum Combistation Duo



Vægstation med 500 ml pH Neutral Duo og 1.000 ml Plum Øjenskyller Duo, vægophæng, løst piktogram og spejl. Specielt velegnet til steder hvor der er risiko for ulykker med såvel fremmedlegemer som syrer og baser, samt hvor der er risiko for at begge øjne rammes.

Skylletid: ca. 2 min.
pH Neutral ca. 5 min.
Varenr.: 4807
Forpakning: 1 stk.

Plum Combiboks Duo



Støvtæt vægstation i slagfast flamingo med 500 ml pH Neutral Duo og 1.000 ml Plum Øjenskyller Duo. Specielt velegnet til støvede produktionsområder hvor der er risiko for ulykker med såvel fremmedlegemer som syrer og baser samt, hvor der er risiko for at begge øjne rammes. Er udstyret med piktogram på fronten og spejl indvendig i låget.

Skylletid: ca. 2 min.
pH Neutral ca. 5 min.
Varenr.: 4809
Forpakning: 1 stk.

Bæltetaske til 200 ml flasker



En praktisk taske, der kan sættes i bælte, arbejdstøj eller lign. Den er let at åbne, hvis uheldet er ude og giver en sikker og hygiejnisk beskyttelse af flasken.

Varenr.: 4692
Forpakning: 10 stk.

Station med pH Neutral og Plum Øjenskyller



Støvtæt vægstation i slagfast flamingo med 200 ml pH Neutral og 500 ml Plum Øjenskyller. Specielt velegnet til steder hvor der er risiko for ulykker med syrer og baser. Er udstyret med piktogram på fronten og spejl indvendig i låget.

Skylletid: ca. 2 min.
pH Neutral ca. 5 min.
Varenr.: 4790
Forpakning: 1 stk.

Alle flasker er CE-mærket og har en holdbarhed på 3 år

Spild ikke tiden på små skader

QuickFix



Det er fint med en førstehjælpskasse, når det for alvor går galt, men hver dag sker der massevis af små uheld på landets arbejdspladser. Langt de fleste kræver blot et plaster på såret - så er du hurtigt videre. Med QuickFix sætter du førstehjælpen til disse små skader i system, så du hurtigt løser problemet for den uheldige og ikke spilder mere tid på skaderne end højst nødvendigt. Og så er systemet hygiejnisk. Let. Altid klar. Hurtigt på - og tilbage til arbejdet.

Den unikke dispenser er rygraden i systemet:

- Giver umiddelbar adgang til plaster
- Løser de fleste uheld hurtigt, let og hygiejnisk
- Kan betjenes med én hånd
- Kan fyldes med forskellige plastertyper efter behov
- Det er tydeligt at se, når den er tom
- Nemt at standse mindre blødninger, også uden at plette på de øvrige plaster
- Små dimensioner gør den let at placere
- Rummer hylde til opbevaring af relevante småting
- Hvert plaster er pakket for sig
- Kan låses, så den kun kan åbnes med nøgle

Water Resistant



QuickFix plasterdispenser inkl. 2 x water resistant plasterrefill Varenr. 5501 Forpakning: 1 stk.

QuickFix water resistant plasterrefill med 45 plaster Varenr. 5511 Forpakning: 6 x 45 stk.

Vandfaste plaster, der især er velegnede til fugtige arbejdsmiljøer. Plasterne er produceret i et beskyttende PE-materiale, der lader huden ånde.

Elastic




QuickFix plasterdispenser inkl. 2 x elastic plasterrefill Varenr. 5502 Forpakning: 1 stk.

QuickFix elastic plasterrefill med 45 plaster Varenr. 5512 Forpakning: 6 x 45 stk.

Elastiske stofplaster, der tilpasser sig hudens bevægelser og er dermed meget behagelige at have på. Plasterne er specielt åndbare.

Detectable

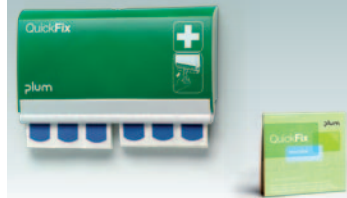

QuickFix plasterdispenser inkl. 2 x detectable plasterrefill Varenr. 5503 Forpakning: 1 stk.

QuickFix detectable plasterrefill med 45 plaster Varenr. 5513 Forpakning: 6 x 45 stk.

Løjnefaldende blå plaster med indbygget metallade, der kan spores af en metaldetektor. Plasterne er produceret i åndbart PE-materiale, der også er vandfast.

Elastic og Water Resistant



QuickFix plasterdispenser inkl. 1 x elastic og 1 x water resistant plasterrefill. Varenr. 5507. Forpakning: 1 stk.

En kombination af elastic og water resistant plaster dækker alle behov på arbejdspladsen. Plasterdispenseren er således både velegnet til fugtige arbejdsmiljøer samt alm. arbejdspladser, hvor man ønsker et plaster, som tilpasser sig hudens bevægelser.

QuickFix dispenser er kun 23 cm bred og 13,5 cm høj. Den rummer 90 plaster trods de beskedne mål. Dermed er det let at finde plads til plaster lige dér, hvor behovet er størst.

De praktiske refiller kan også bruges i førstehjælpskassen, handskerummet og andre steder, hvor en mobil løsning er praktisk.



Hurtigt tilbage til arbejdet



Træk plasteret ud af dispenserens



Plasteret er klar til brug med det samme



Plasteret kan påsættes med én hånd

Altid lige ved hånden

Med den nye QuickFix Mini er det slut med tidsrøvende og ofte besværlig søgen efter et plaster. Den lille og praktiske forpakning kan ligge i handskerummet, i værktøjskassen, tages med i bilen, lastbilen, i tasken, i jakken, førstehjælpskassen osv. Så er du altid beredt, når du møder livets små overraskelser.

QuickFix Mini leveres med 30 elastic plastre.

Varenr. 5504

Forpakning: 30 x 30 stk.



Lad QuickClean gøre arbejdet

Selv små sår og rifter bør renses, inden du kommer plaster på. Er der først kommet snavs i såret, er det nemlig længere tid om at hele. Med QuickClean har du altid en ren og fugtig renseserviet ved hånden.



Så nemt er det at rense



Træk servietten ud af æsken.



Riv i siden og servietten er klar til brug



Rens såret. Hurtigt og effektivt

QuickClean Sårrens med vægholder



Vægholder med 40 sårrenseservietter til at placere så tæt på arbejdsstedet som muligt. Hver serviet er indpakket separat og indeholder sterilt vand.

Servietmål: 130 x 200 mm.

Servietten er CE-mærket.

Varenr.: 5550
Forpakning: 6 x 40 stk.

QuickClean Sårrens



Æske med 40 sårrenseservietter. Hver serviet er indpakket separat og indeholder sterilt vand. Kan anvendes løst eller som refillboks til vægholderen.

Servietmål: 130 x 200 mm.

Servietten er CE-mærket.

Varenr.: 5551
Forpakning: 11 x 40 stk.

Brug sårrens og bliv klar igen i en fart

Småskader er ikke til at undgå - de er nærmest en naturlig konsekvens af at få noget fra hånden. Til gengæld kan de udvikle sig til større skader, hvis der går infektion i dem. Men det kan du let undgå.

Infektioner koster dyrt

Resultatet af en infektion i selv en lille rift kan f.eks. være en øm finger, som i værste fald betyder daglig irritation og gener i forbindelse med arbejdet. En alt for stor omkostning den lille skade taget i betragtning. Sørg derfor for at rense sår og rifter – uanset hvor uskyldige de ser ud.

God sårhygiejne starter med tilgængelighed

Når alt kommer til alt handler god sårhygiejne om tilgængelighed. Det er ikke altid, at vand er tilgængeligt, når du vil rense såret. Med QuickClean har du altid mulighed for at rense sår og rifter med det samme. Hurtig og hygiejnisk. Vægholderen kan monteres direkte på arbejdsstedet, så du og dine kollegaer altid har sårrens ved hånden, når uheldet er ude.



Øjenskyll som
altid er nem
at få fat i

Et spejl gør det nemmere at
undersøge skadens omfang
og skylle målrettet

På den her måde er
plastrene nemme at få fat
i – selv med én hånd

Sårrens er vigtigt
for hygiejnen

Mål: 515 mm x 300 mm

Varenr.: 5102

Gør førstehjælpen let at gå til

Sæt førstehjælpen i system

Vi har samlet de mest nødvendige produkter i en førstehjælpsstation. Den kan du hænge op relevante steder i arbejdsområderne, hvor behovet er størst.

Udgangspunktet er dine behov

Førstehjælpsstationen består af 500 ml Plum Øjenskyller, en QuickFix plasterdispenser med 45 elastic og 45 water resistant plastre samt en QuickClean med 40 sårrenseservietter. I samme station kan du således dække behovet for både øjenskylning samt rensning og behandling af små sår og rifter. Det giver en hurtig og nem førstehjælp, som skaber tryghed for dig og dine kollegaer.

Når alt kommer til alt handler førstehjælp om at vide, hvor du kan finde præcis den hjælp, der er brug for – så hurtigt som muligt efter skaden er sket.



Skab tryghed på arbejdspladsen
med en tilpasset førstehjælpsløsning

Se mere på www.plum.dk

Plum A/S
Frederik Plums Vej 2 · DK-5610 Assens
Telefon +45 6471 2112 · Telefax +45 6471 2125
info@plum.dk · www.plum.dk

plum